


| Linee di campionamento NomoLine®

Set di adattatori per vie aeree e cannule per tutti i pazienti in condizioni di bassa e alta umidità




Linee di campionamento per uso a breve e lungo termine con tecnologia che rimuove l'umidità e fornisce misurazioni capnografiche e di monitoraggio del gas accurate.

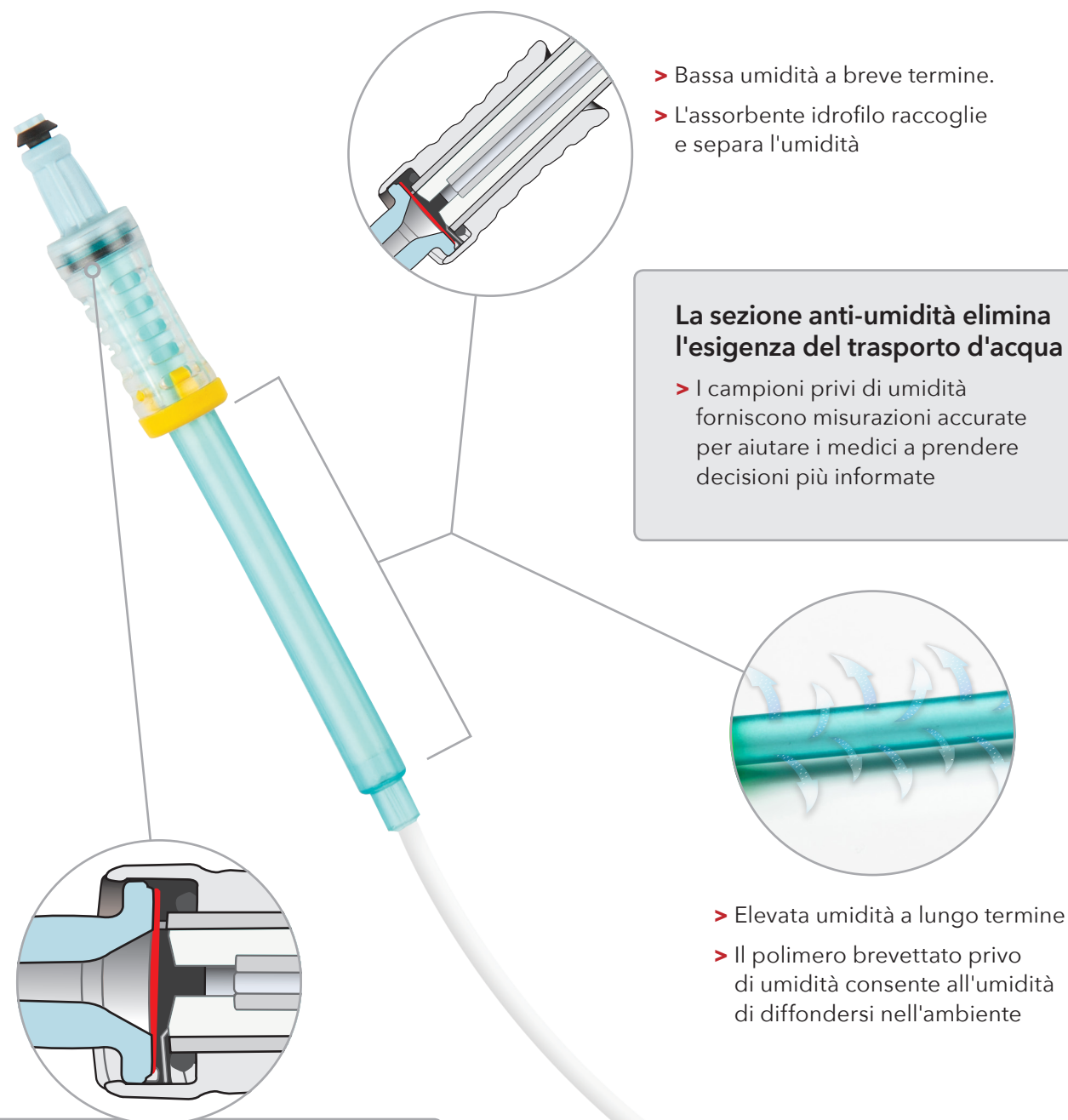

- > Bassa umidità a breve termine.
- > L'assorbente idrofilo raccoglie e separa l'umidità

La sezione anti-umidità elimina l'esigenza del trasporto d'acqua

- > I campioni privi di umidità forniscono misurazioni accurate per aiutare i medici a prendere decisioni più informate

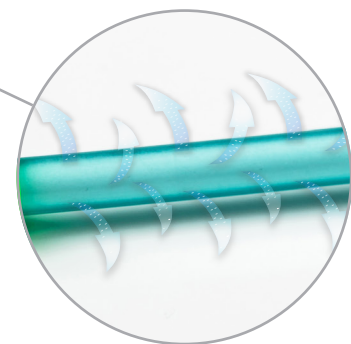

- > Elevata umidità a lungo termine
- > Il polimero brevettato privo di umidità consente all'umidità di diffondersi nell'ambiente

Il filtro antibatterico idrofobico riduce la contaminazione dell'analizzatore ISA™

- > Allunga la vita del modulo riducendo l'introduzione di acqua
- > Garantisce la sicurezza riducendo il rischio di contaminazione batterica



Le cannule dal design ergonomico migliorano il comfort del paziente


- > Le cannule leggere e morbide dal design curvo si adattano ai contorni del viso per ridurre al minimo la pressione
- > Molteplici opzioni consentono l'uso con tutte le popolazioni di pazienti

La linea di campionamento progettata in modo univoco consente l'utilizzo durante le applicazioni a flusso ridotto e di dimensioni ridotte

- > Richiede solo un piccolo campione di fiato, 50 ml/min
- > I set di adattatori per vie aeree con spazio morto ridotto consentono un tempo di salita più rapido e una forma d'onda inalterata



- > Il tubo di erogazione dell'ossigeno a lume stellato garantisce l'alimentazione anche se piegato

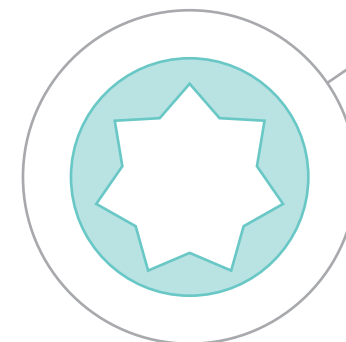


Dispositivi compatibili



> Tempo di avviamento rapido

Non richiede praticamente tempi di riscaldamento e raggiunge la piena accuratezza in dieci secondi, senza richiedere alcuna calibrazione¹.

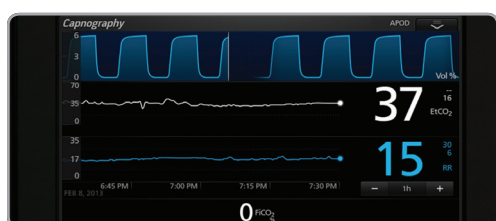

Visualizzazione della forma d'onda

La forma d'onda EtCO₂ in tempo reale offre una visualizzazione facilmente interpretabile delle misurazioni capnografiche.



Indicatori LEGI (Light Emitting Gas Inlet)

L'indicatore si illumina di diversi colori per fornire indicazioni visive dello stato del modulo per capnografia e il connettore plug-in semplice fornisce al dispositivo una connessione senza perdite.

Specifiche della linea di campionamento NomLine

Opzioni di lunghezza	2 m e 3 m
Velocità del flusso di campionamento	50±10 ml/min
Filtro antibatterico Inline	BFE ≥ 99,9%
Diametro interno della tubazione	1 mm
Apporto di ossigeno supplementare	Fino a 5 l/min
Spazio morto dell'adattatore per vie aeree	
Adulto/Pediatico	≤ 6 ml
Lattanti e neonati	≤ 0,7 ml
Materiale	Non contiene lattice di gomma naturale

¹ Fare riferimento al Manuale dell'operatore del dispositivo.

Rad-97™ con capnografia NomLine non ha licenza di vendita in Canada.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

