

UniView™

Display intelligente per l'aggregazione dei dati e la visualizzazione degli allarmi di prossima generazione




- > UniView aggrega dati e allarmi per numerosi dispositivi Masimo e di terze parti, quali monitor paziente, ventilatori e macchine per anestesia, pompe EV e altri dispositivi connessi tramite i sistemi Masimo, su un display supplementare
- > La visualizzazione integrata dei dati in tempo reale riduce il sovraccarico cognitivo e facilita la condivisione dei dati tra più medici, consentendo loro di individuare i trend e di coordinare la terapia
- > Gli indicatori visivi degli allarmi, inviati dai dispositivi connessi, consentono ai team di assistenza di riconoscere una sofferenza del paziente e di individuare le aree di attenzione clinica
- > I layout della schermata adattati all'uso nel caso specifico ottimizzano la presentazione di parametri integrati e avanzati, dei dati dei trend e delle forme d'onda delle aree di cura critiche
- > Il layout adattabile si riconfigura automaticamente in base ai dispositivi connessi

Layout della schermata adattato


I layout della schermata adattati all'uso nel caso specifico consentono ai medici di visualizzare i dati pertinenti applicabili a un team di terapia clinica

Layout Panoramica

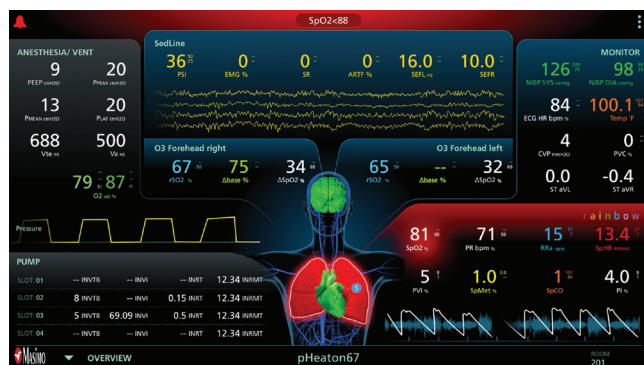


Il layout adattabile si riconfigura automaticamente in base ai dispositivi connessi per ottimizzare la visualizzazione dei dati dei parametri, compresi le forme d'onda e gli allarmi, per offrire una panoramica dello stato del paziente

Layout Ossigenazione

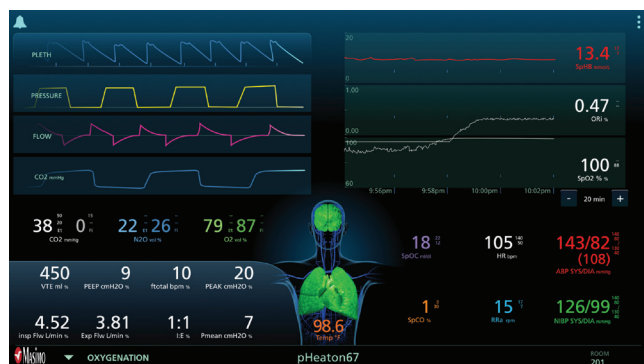

Visualizza le forme d'onda della ventilazione insieme al monitoraggio non invasivo dei trend dell'emoglobina (SpHb) e della saturazione dell'ossigeno (SpO2) per monitorare lo stato di ossigenazione del paziente

Layout Emodinamica

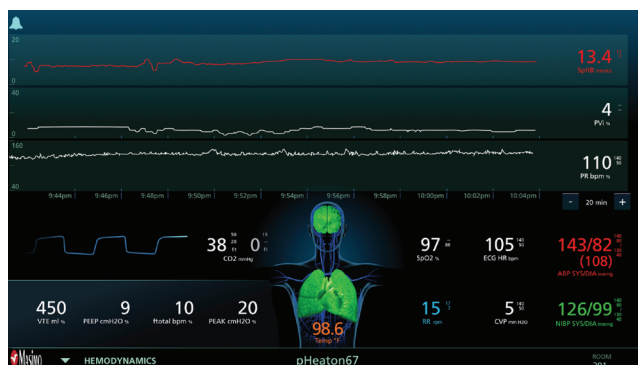

Visualizza in modo non invasivo i dati dei trend dell'emoglobina (SpHb®), dell'indice di variabilità pleiomografica (PVi®) e la frequenza del polso (PR) per offrire supporto nella visualizzazione dello stato del paziente nel tempo

Layout Sedazione



Visualizza le forme d'onda dell'EEG in alta fedeltà, l'indice di stato del paziente (Psi) e i dati della macchina per anestesia per monitorare la profondità dell'anestesia del paziente

Informazioni per gli ordini

	Numero di parte
UniView Mini-PC	9856
Componenti del sistema Masimo richiesti	
Patient SafetyNet™*	9095
Iris Gateway™	9712

*L'uso del marchio SafetyNet è sotto licenza di University HealthSystem Consortium.

ORi™ ha ottenuto il marchio CE. Non disponibile negli Stati Uniti. ORi non ha licenza di vendita in Canada.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

