


Soluzioni di monitoraggio per pazienti con bassa perfusione

Una gamma completa di sensori con pulsossimetria affidabile per pazienti adulti e pediatrici in terapia intensiva



Masimo offre una varietà di sensori progettati per monitorare in modo affidabile i pazienti con bassa perfusione periferica

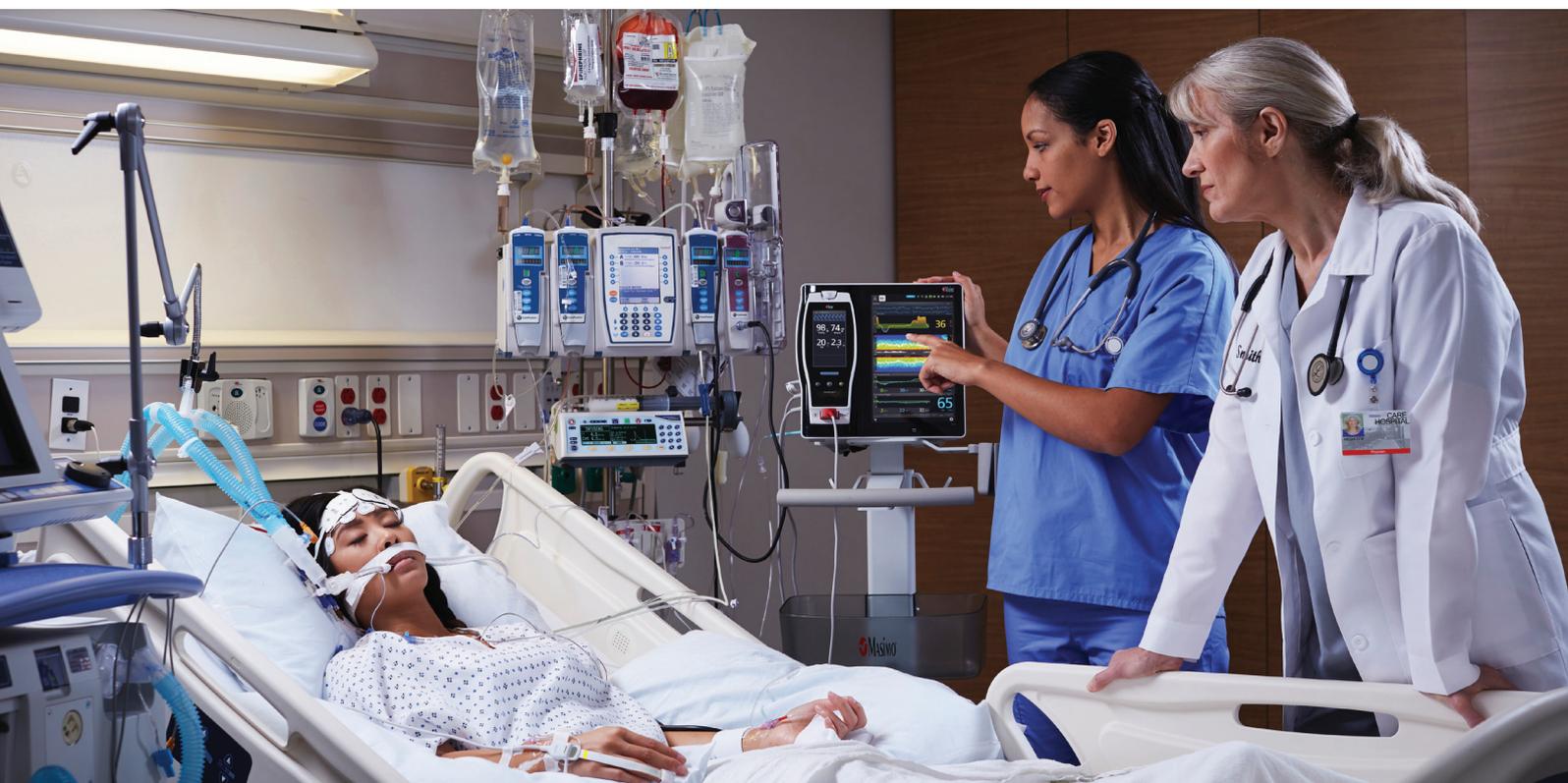

Il pulsossimetro Masimo SET® fornisce misurazioni affidabili anche in condizioni di movimento difficili e di bassa perfusione



I sensori per orecchio e fronte possono fornire misurazioni della saturazione dell'ossigeno meno sensibili ai cambiamenti nella perfusione periferica



I sensori Trauma configurano automaticamente i dispositivi Masimo per garantire tempi del calcolo della media più rapidi e impostazioni di sensibilità massima



L'indicatore Signal IQ® visualizzato sui dispositivi Masimo consente ai medici di monitorare l'affidabilità del segnale

 **MASIMO**

Sensori flessibili e versatili

Masimo offre una varietà di sensori monopaziente e riutilizzabili progettati per il monitoraggio di zone meno sensibili alle variazioni di perfusione periferica.

- I sensori per orecchio e fronte offrono un accesso agevole durante interventi chirurgici, rianimazione e in pazienti con deformazioni delle dita o in caso di impossibilità di accedere alle dita

- I sensori Trauma configurano automaticamente i pulsossimetri Masimo SET® per tempi di risposta ultrarapidi e impostazioni di sensibilità massima, consentendo ai medici di concentrarsi sull'assistenza al paziente



Sensore per orecchio E1®



Sensore per fronte TFA-1™



Sensore Trauma



Sensore per orecchio TC-I




Sensore per fronte TF-1®



Risposta più rapida alle variazioni di ossigenazione

In uno studio di confronto dei tempi di risposta, i sensori per orecchio e fronte hanno mostrato un rilevamento più rapido della desaturazione e risaturazione rispetto ai sensori a dito¹

Desaturazione in un soggetto sano con bassa perfusione

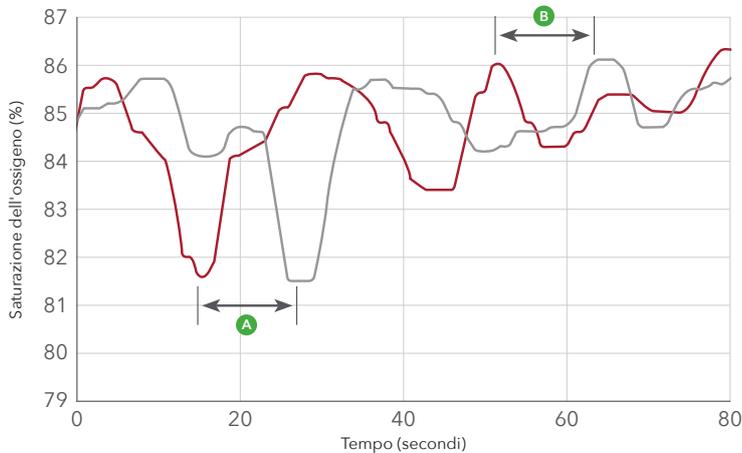

I sensori per fronte TFA-1 e per orecchio E1 con Masimo SET® offrono:

- A** Rilevamento più rapido degli eventi di desaturazione
- B** Indicazione più rapida della risaturazione²

— Sensori per orecchio e fronte con Masimo SET®
— Sensori a dito con Masimo SET®

Informazioni per gli ordini

Tipo di sensore	Numeri di parte
LNCS® E1	2918
M-LNCS™ E1	2919
LNCS TFA-1	3858
M-LNCS TFA-1	3856
LNCS TC-I	1895
M-LNCS TC-I	2503

Tipo di sensore	Numeri di parte
LNCS TF-I	1896
M-LNCS TF-I	2504
RD SET™ Trauma	4011
LNCS Trauma	2411
M-LNCS Trauma	2521

¹ Redford DT et al. *Anesth Analg*, 2004;98(25):S-94. ² Dati di archivio.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

